

RESMED

S9 AutoSet™ & S9 Elite™

POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES



Welcome Guide


Türkçe

S9™ Series
More. Comfort.

S9[™] | Series
More. Comfort.

Hoş geldiniz

S9 AutoSet veya S9 Elite'i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu cihazları kullanmadan önce, lütfen Hoş Geldiniz ve Bilgi Kılavuzları'nın tamamını okuyunuz.

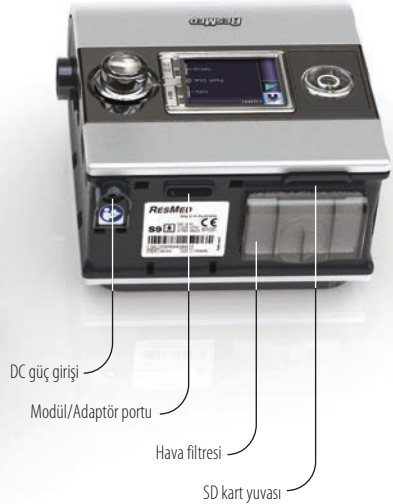

S9'a bakış

S9 sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşur:

- S9 cihazı • SlimLine hava tüpü • 90W veya 30W güç kaynağı birimi • S9 seyahat çantası • SD kart • S9 SD kart koruyucu kılıfı.

Opsiyonel bileşenler şunlardır:

- H5i ısıtılmış nemlendirici • H5i su haznesi • Standart hava tüpü • ClimateLine ısıtılmış tüp • ClimateLine^{MAX} ısıtılmış tüp • 90W güç kaynağı birimi • 30W güç kaynağı birimi (H5i'yi desteklemez) • Power Station II batarya paketi • DC/DC Dönüştürücü 24 V/90 W.

Seyahat önerileri

Yalnız S9 cihazınızla seyahat ederken:

- ClimateLine veya ClimateLine^{MAX} ısıtılmış hava tüpü doğrudan S9 cihazına bağlanmak için tasarlanmadığından, SlimLine veya Standart hava tüpünü yanınıza aldığınızdan emin olun.
- Lütfen S9 cihazınızı kullanacağınız bölge için onaylı güç kablosunu satın aldığınızdan ve seyahatinizde yanınızda bulduğunuzdan emin olun.



Kurulum

1. Güç kaynağı biriminin DC kablosunu S9'un arkasına bağlayın.
2. Güç kablosunu güç kaynağı birimine bağlayın.
3. Güç kablosunun diğer ucunu prize takın.
4. Hava tüpünün bir ucunu sıkıca hava çıkışına bağlayın.
5. Monte edilmiş maske sistemini hava tüpünün serbest ucuna bağlayın.

Notlar:

- Maskenizin montajı hakkında daha fazla bilgi için maske kullanım kılavuzuna bakın.
- Tavsiye edilen maskeler www.resmed.com adresinde Products (Ürünler) sayfasında Service & Support (Ürün Servis ve Destek) bölümünün altında bulunabilir.

S9'un temel özellikleri

Başlat/Durdur düğmesi
Tedaviyi başlatır veya durdurur.

Ana menü


LCD ekran


Kurulum menüsü*
Ayarları değiştirmenizi sağlar.


Bilgi menüsü*
Uyku istatistiklerinizi görüntülemenizi sağlar.


Dial tuşu
Dial tuşunun çevrilmesi menüde gezinmenizi ve ayarları değiştirmenizi sağlar. Dial tuşuna basılması bir menüye girmenizi ve seçiminizi onaylamanızı sağlar.

Tuş:

Anasayfa 


Nemlilik Düzeyi 

Yükselme 


Isıtılmış tüp 

Climate Control 

Başlat/Durdur 

Dial tuşu 

Kurulum menüsü 

Bilgi menüsü 

*Klinisyeniniz tarafından S9 Essentials etkinleştirilmişse Bilgi ve Kurulum menüleri devre dışı bırakılır.

Yükselme süresinin ayarlanması

Tedavi başlangıcını daha rahat kılmak için tasarlanmış olan yükselme süresi, basıncın düşük bir başlangıç basıncından tedavi basıncına yükseldiği süredir. Yükselme süresini ayarlamak için:



1. Başlangıç ekranından, YÜKSELME ekranı mavi görüntülenene dek düğmesini çevirin.
2. düğmesine basın. Bu seçim turuncu renkle belirtilecektir.
3. İhtiyaç duyduğunuz yükselme süresi görüntülenene dek düğmesini çevirin.
4. Seçiminizi onaylamak için düğmesine basın.

Maske takmanın kullanımı

Maskenizi düzgün takmaya yardım etmesi için maske takmayı kullanabilirsiniz. Bu özellik, tedavi başlamadan önce üç dakika süre ile tedavi basıncı verir; bu sürede maskenizi kontrol edebilir ve kaçağı minimuma indirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. Maskenizi, maske kullanım kılavuzunda belirttiği şekilde takın.
2. Başlangıç ekranından, üç saniye boyunca düğmesine basılı tutun. Aşağıdaki MASKE OTURUMU ekranlarından biri görüntülenir:



3. Gerekirse maskenizi, maske yastığını ve başlığı İyi bir maske takma sağlanana kadar ayarlayın. Üç dakikadan sonra, basınç, ayarlı basınç seviyesine döner ve tedavi başlar. Maske takmayı herhangi bir zamanda tuşuna basarak sonlandırabilirsiniz.


S9 Essentials

S9 Essentials cihazla etkileşim ve menü navigasyonunu sizin için daha kolay hale getirmek üzere tasarlanmıştır. Kliniye tarafından etkinleştirilmişse S9 Essentials basitçe tedaviyi başlatıp durdurabilmeniz ve rampa, nemiendirme ve Climate Control'u ayarlayabilmeniz için Bilgi ve Kurulum işlevselliğini devre dışı bırakır.


Maske türünün seçilmesi*

Maske türünüzü seçmek için:




1.  düğmesine basın. AYARLAR ekranı görüntülenir.




2. Maske mavi olarak görüntülenene dek  düğmesini çevirin.




3.  düğmesine basın. Bu seçim turuncu renkle belirtilecektir.




4. İhtiyaç duyduğunuz maske ayarı görüntülenene dek  düğmesini çevirin.





5. Seçiminizi onaylamak için  düğmesine basın.



6. Başlangıç ekranına dönmek için  düğmesine basın.

*Kliniye tarafından S9 Essentials etkinleştirilmişse maske tipini seçmek mümkün değildir.

Başlarken

1. Gücün bağlı olduğundan emin olun.
2. Gerekirse yükselme süresini ayarlayın.
3. Maskenizi, maske kullanım kılavuzunda belirttiği şekilde takın.
4. Tedaviye başlamak için, maskenizin içine nefes alın ve/veya  düğmesine basın.
5. Yatağa uzanın ve hava tüpünü uykunuzda hareket etmeniz de serbest kalacak şekilde ayarlayın.
6. Herhangi bir anda tedaviyi durdurmak için maskenizi çıkarın ve/veya  düğmesine basın.

Notlar:

- Doktorunuz cihazınızda SmartStart özelliğini açıyorsa maskenizin içine nefes aldığınızda cihaz otomatik olarak başlayacak ve maskeyi çıkardığınızda otomatik olarak duracaktır.
- Tedavi başladıktan sonra bir tedavi ekranı görüntülenir.
- Tedavi sırasında güç kesilirse tekrar güç geldiğinde cihaz tedaviyi otomatik olarak tekrar başlatır.

Temizlik ve bakım

Bu cihazların bakımıyla ilgili detaylı talimatlar için maskenizin ve nemlendiricinizin kullanıcı kılavuzuna bakın.

Günlük

Kelepçe üzerindeki parmak tokalarını çekerek hava tüpünü çıkarın. Bir sonraki kullanıma kadar temiz, kuru bir yere asın.

Notlar:

- Hava tüpünü doğrudan güneş ışığı altına asmayın çünkü zamanla sertleşebilir ve sonuçta kırılabilir.
- Hava tüpünü çamaşır veya bulaşık makinesinde yıkamayın.

Haftalık

1. Hava tüpünü S9 cihazı ve maskeden çıkarın.
2. Hava tüpünü hafif deterjanla ılık suda yıkayın.
3. İyice durulayın, asın ve kurumaya bırakın.
4. Sonraki kullanımdan önce hava tüpünü hava çıkışına ve maskeye tekrar bağlayın.

Aylık

1. S9'un dışını nemli bir bez ve hafif bir deterjanla silin.
2. Hava filtresinde delikler ve kirden dolayı tıkanmalar olup olmadığını kontrol edin. Gerektiğinde hava filtresini yenisiyle değiştirin.

Hava filtresinin değiştirilmesi

Hava filtresini altı ayda bir (veya gerekirse daha sık) değiştirin.

1. Hava filtresi kapağını S9 cihazının arkasından çıkarın.
2. Eski hava filtresini çıkarıp atın.
3. Yeni bir ResMed hava filtresini, filtre kapağı üzerinde düz olarak oturduğundan emin olarak takın.
4. Hava filtresi kapağını değiştirin.

Notlar:

- Hava filtresinin ve hava filtresi kapağının her zaman takılı olmasını sağlayın.
- Hava filtresini yıkamayın. Hava filtresi yıkanamaz veya tekrar kullanılamaz.

Hava filtresi kapağı

Hava filtresi




SD kart

S9 cihazınızdan tedavi verilerini toplamak ve doktorunuzdan ayar güncellemeleri temin etmek için bir SD kart tedarik edilmiştir. Yönlendirildiğiniz takdirde, S9 cihazını fişten çekin, SD kartınızı çıkarın, koruyucu kılıfa koyun ve doktorunuza gönderin.

Kartın çıkarılması

1. Serbest bırakmak için SD kartı itin.
2. Kartı çıkarın.
3. Kartı koruyucu kılıfın içine koyun.
4. Yönlendirildiği şekilde koruyucu kılıfı doktorunuza geri gönderin.

Kartın çıkarılması ve takılması ile ilgili daha fazla bilgi için, cihazınızla birlikte tedarik edilen S9 SD Kart Koruyucu Kılıfı'na bakınız. Lütfen S9 SD Kart Koruyucu Kılıfı ilerde kullanmak için saklayın.

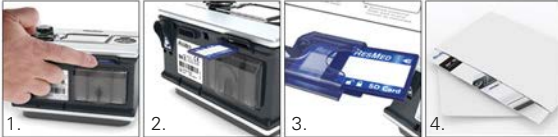

Notlar:

- Sorun giderme bilgisi için Bilgi Kılavuzu'na bakın.
- Daha fazla ürün bilgisi için www.resmed.com sitesine bakın.

S9[™] | Series
More. Comfort.

368868/3 2013-04

S9 Series
AutoSet & Elite

WELCOME

EUR 1/3



Manufacturer: ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia. **Distributed by:** ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA. **EC REP** ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK. See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide.

For patent information, see www.resmed.com/ip.

S9, AutoSet, S9 Elite, H5i, ClimateLine, SlimLine and SmartStart are trademarks of ResMed Ltd. S9, AutoSet, H5i, ClimateLine and SlimLine are registered in U.S. Patent and Trademark Office.

© 2013 ResMed Ltd.

CE
0123